



AgraStrip Pro Алерген

AgraStrip® Pro Allergen LFD кит - съдържание:

- 15 AgraStrip® Pro проточни теста
- 1 бутилка с готов буфер за екстрахиране
- 15 туби за екстрахиране с капачки
- 15 инкубационни епруветки
- 15 стерилни тампона с подготвени за отчупване накрайници
- 1 поставка за инкубационни епруветки

Тестови процедури за:

- Сурови и обработени храни
- Води за изплакване
- Тампонни проби

Видове тестове за алергени:

• AgraStrip® Pro бадем	10007055	• AgraStrip® Pro лупина	10007064
• AgraStrip® Pro β-лактоглобулин	10007056	• AgraStrip® Pro макаронени изделия	10007065
• AgraStrip® Pro бразилски орех	10007057	• AgraStrip® Pro мляко	10007066
• AgraStrip® Pro казеин	10007058	• AgraStrip® Pro горчица	10007067
• AgraStrip® Pro кашу/шамфъстък	10007059	• AgraStrip® Pro фъстък	10007068
• AgraStrip® Pro кокосов орех	10007060	• AgraStrip® Pro сусам	10007069
• AgraStrip® Pro ракообразни	10007061	• AgraStrip® Pro соя	10007070
• AgraStrip® Pro глутен	10007062	• AgraStrip® Pro орех	10007071
• AgraStrip® Pro лешник	10007063	• AgraStrip® Pro яйца	10007072



ELISA китове за количествено измерване на алергени в храни:

- AgraQuant® Allergen ELISA тест кит
- AgraQuant® Plus Allergen ELISA тест кит


AgraStrip® Pro алерген глютен – начин на работа

Allergens




AgraStrip


Процедура за течни и твърди проби

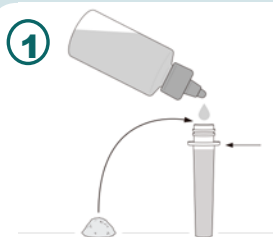

Добавете 0,2 ml течна проба (или вода за изплакване) или претеглете 0,2 g от хомогенизираната проба в туба за екстрахиране. Напълнете с екстрахиращ буфер до ниво, показано на снимката.

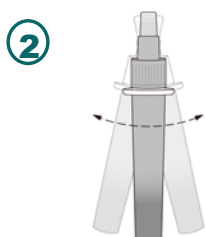


Затворете тубата с капачката и енергично разклатете с ръка в продължение на една минута.

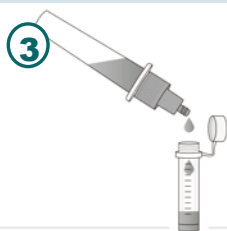


Отстранете капачката на на капкомера и прехвърлете шест капки (200 µL) в инкубационна епруветка. Затворете капачката на инкубационната епруветка.




Разклатете инкубационната епруветка енергично на ръка за 15 секунди. Уверете се, че течността влиза в контакт с капачката на епруветката.

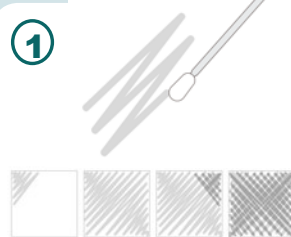


Напълнете туба за екстракция с буфер за извличане до гърлото на тръбата (вижте стъпка 1 за твърди/течни проби). Намокрете тампон, като го потопите в буфера. Избършете от страна до страна област от 5 x 5 cm, като междувременно завъртате върха на тампона.

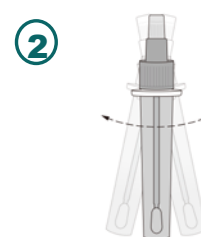

Поставете тампона в епруветка за екстракция и внимателно отчупете края до предварително отбелязаната точка. Затворете епруветка с капачка и разклатете енергично за 1 минута.

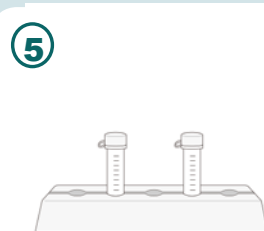

Почукнете основата на епруветката върху повърхност, за да се гарантира, че не е останала течност в капачката. Оставете епруветката да се инкубира върху поставката при стайна температура за 5 минути.

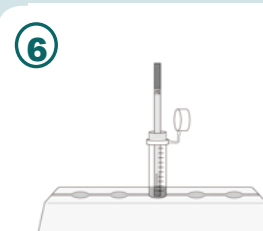


Поставете в инкубационната епруветка една тест лента вертикално със стрелки, сочещи надолу. Инкубирайте за 5 минути.
Прочетете веднага резултата.

Интерпретиране на резултата


Отрицателен резултат:

В тестовата област се появява само контролна линия (C)

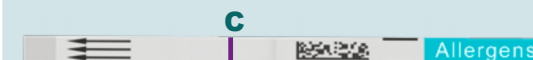

Положителен резултат:

В тестовата област се появяват контролната линия (C) и тестовата линия (T). Пробата съдържа целевия алерген в по-висока концентрация от граничната стойност за теста.

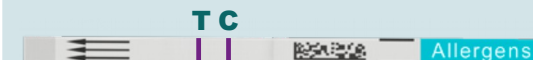

Невалиден резултат:

Не се появява контролна лента (C). Независимо дали в тестовата зона се появява тестова линия (T), моля, повторете теста с нова тестова лента.

* Cut-off values must be validated for each matrix.